

Patientstolar

UNDERSÖKNINGSSTOLAR | BEHANDLINGSSTOLAR



 GREINER

PRODUKTION

GREINERS fabrik på ca 16,000 kvadratmeter hittar du i byn Pleidelsheim I södra Tyskland.

Datorstödd automation har länge varit en del av företagets produktionshallar och är även en av anledningarna till att GREINERS produkter har så hög kvalitet. GREINERS enastående kvalitet när det gäller design, funktionalitet och teknologi, i kombination med en stor flexibilitet för att integrera nödvändiga arbetsmoment, gör företaget till en självklar partner till kvalitetsmedvetna kunder.

GREINER utvecklar kontinuerligt nya produkter, vilket skapar standarder när det gäller innovation, design, individualitet och funktionell kvalitet. Ett oberoende certifierat kvalitetssäkringssystem befäster företagets genomgående höga standard. GREINER är certifierade enligt DIN EN ISO 9001.



ÖVERSIKT

MEDSEAT

GREINERS undersökningsstolar och behandlingsstolar MEDSEAT är ett resultat av 30 års konstant design och utveckling. Stolarna har en kompromisslös kvalitet samt en praktisk funktion och kombinerar avslappnat sittande med effektivt arbete för långvarig användning.



MEDSEAT HVE

Elektrisk höjdjustering och synkron elektrisk eller manuell justering av rygg- och benstöd.



MEDSEAT HVE SEP

Elektrisk höjdjustering och separat, elektrisk justering av rygg- och benstöd.



MEDSEAT HVH

Hydraulisk höjdjustering och manuell synkron justering av rygg- och benstöd.



MEDSEAT PODOLOGIE

Elektrisk eller hydraulisk höjdjustering; manuell eller elektrisk justering av ryggstöd, benstöd i fyra delar för podiatri .



TEKNISK INFORMATION

TILLBAKALUTANDE JUSTERING

ELEKTROMOTORISK SYNKRON (1)


Ryggstödet och benstöden kan justeras synkront till horisontellt läge med hjälp av fotpedalen, eventuell även med ytterligare styrelement i ryggstödet **(8)** (beroende på modell). Stolen kan roteras runt sin egen axel begränsat till ca 330°. Behandlingsstolen kan säkras säkert i valfritt läge.

ELEKTROMOTORISK SEPARAT (2)

Ryggstödet och benstöden kan justeras synkront till horisontellt läge med hjälp av fotpedalen, eventuell även med ytterligare styrelement i ryggstödet **(9)**. Stolen kan roteras runt sin egen axel begränsat till ca 330°. Behandlingsstolen kan säkras säkert i valfritt läge.

MANUELLT SYNKRON (3)

Rygg- och benstöd kan justeras synkront till horisontellt läge med hjälp av en gasttrycksfjäder. Behandlingsstolar med fällbara ytor som justeras manuellt kan roteras oändligt runt sin egen axel. Behandlingsstolen kan säkras säkert i valfritt läge.

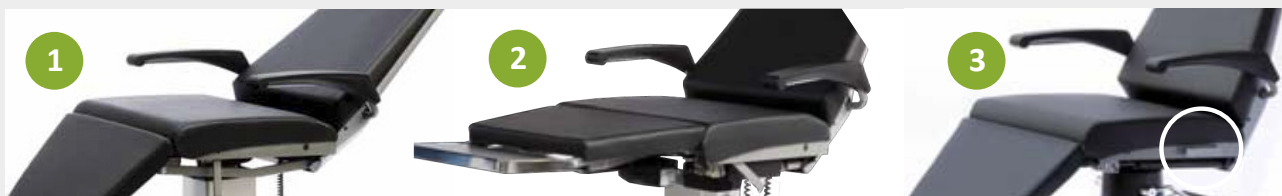

BENSTÖD

Medseats med synkront roterande benstöd **(4)** gör det möjligt att behandla patienter i liggande läge. Som alternativ finns modeller utan benstöd **(5)**; ett urval av 3 fasta fotstöd finns som tillbehör



ARMSTÖD

De integrerade armstöden **(6)** kan vridas bakåt, vilket gör stolen helt tillgänglig för behandling. Armstöden sänks när ryggstödet justeras till liggande nivå, vilket underlättar åtkomsten till patienten.

SITTDYNA

Varje behandlingsstol, oavsett sittyta, kan förses med en roterande sittedyna (7) på vilken patienten vrids 90° åt vänster eller höger.



FUNDAMENT

ELEKTRISKT JUSTERBAR (10)

Justeringsomfånget för den elektromotoriska sitt- och liggytan är 30 cm. Justering sker med hjälp av en fotpedal, eventuell även med ytterligare styrelement i ryggstödet (8) (beroende på modell).

ELEKTRISKT JUSTERBAR, MOBIL (11)

Justeringsomfånget för den elektromotoriska sitt- och liggytan är 30 cm. Justering sker med hjälp av en fotpedal, eventuell även med ytterligare styrelement i ryggstödet (8) (beroende på modell).
Med hjälp av en fotpedal höjs stolen och fyra hjul fälls ut. Stolen kan sedan lätt flyttas i behandlingsrummet.

HYDRAULISKT JUSTERBAR (12)

Justeringsomfånget för den hydrauliska sitt- och liggytan är 20cm. Justering sker med hjälp av en pumpspak.



MEDSEAT HVE

Elektromotorisk höjjustering och synkron justering av fällbar yta



Justeringsomfånget för den elektromotoriska sitt- och liggytan är 30 cm. Justering sker med hjälp av en fotpedal, eventuell även med ytterligare styrelement i ryggstödet (beroende på modell). Synkron justering av rygg- och

benstöd till horisontellt läge sker med hjälp av en gastyckfjäder. Stolen finns i en mobil version som tillval. Med hjälp av en fotpedal höjs stolen och fyra hjul fälls ut. Stolen kan sedan lätt flyttas i behandlingsrummet.

4736100

Elektriskt höj- och sänkbar, övre delen har elektrisk, synkron höjjustering



4736208

Elektriskt höj- och sänkbar, flyttbar, övre delen har elektrisk höjjustering med manuell kontroll i ryggstödet



MEDSEAT HVE SEP

Elektromotorisk höjjustering
och separat, elektromotorisk
justering av rygg- och
benstöd



Justeringsomfånget för den elektromotoriska sitt- och liggytan är 30 cm. Höjden på stolen kan justeras och den fällbara ytan kan flyttas synkront till horisontellt läge med hjälp av fotpedalen. Höjden på stolen kan justeras samt rygg- och benstöd kan även justeras separat och elektromotoriskt

till horisontellt läge med hjälp av den manuella brytaren. Stolen finns i en mobil version som tillval. Med hjälp av en fotpedal höjs stolen och fyra hjul fälls ut. Stolen kan sedan lätt flyttas i behandlingsrummet.



4736218

Elektriskt höj- och sänkbar, flyttbar, separat och synkron justering av rygg- och benstöd.



4736118

Elektriskt höj- och sänkbar, separat och synkron justering av rygg- och benstöd.

MEDSEAT HVH

Hydraulisk höjdjustering och manuell justering av fällbar yta



Justeringsomfånget för den hydrauliska sitt- och liggytan är 20 cm. Justering sker med hjälp av en pumpspak. Rygg- och benstöd kan justeras synkront till horisontellt läge med hjälp av en gastrycksfjäder. MEDSEATs med synkront

roterande benstöd gör det möjligt att behandla patienter i liggande läge. Som alternativ finns modeller utan benstöd; ett urval av 3 fasta fotstöd finns som tillbehör.



4632000

Hydraulisk höjdjustering, manuell synkron justering.



4622000

Hydraulisk höjdjustering, manuell justering av ryggstödet, vridbar sits, med benstöd som tillbehör (1330900)



4612000

Hydraulisk höjdjustering, manuell justering av ryggstödet.

MEDSEAT PODOLOGIE

Stolar för undersökning och behandling av fötter och blodkärl



4616190

Elektrisk höjdjustering, manuell justering av ryggstöd, med benstöd för podiatri som tillbehör (1337000)

Stolar för behandling av fötter och ben är utrustade med benstöd i fyra delar, vilket ger möjlighet att justera benstödet enligt patientens vader och hälar. Hälstöden kan förlängas med 28 cm. Med hjälp av en gasfjäder kan vänster och

höger sida justeras samt fixeras i höjd separat. Båda halvorna kan dessutom svängas i 45° för att på så sätt göra plats för den behandlande personalen.



3988300

Elektrisk höjdjustering, rund bottenplatta, manuell justering av ryggstöd.

Med lås (1434240), nackstöd (1434240) och benstöd för podiatri (1337000) som tillbehör.



3978600

Elektrisk höjdjustering, rund bottenplatta, fixerat ryggstöd, med benstöd för podiatri som tillbehör (1337000)



4612090

Hydraulisk höjdjustering, manuell justering av ryggstöd, med benstöd för podiatri som tillbehör (1337000)

PATIENTSTOLAR FÖR FLEBOTOMI

Hydraulisk höjdjustering



Stolar från GREINERs 22-serie har en hydraulisk pump med rund bottenplatta eller polerat fotkryss, utrustat med antingen glidkuddar eller hjul (ø 50 mm) och centralbroms. Stolen har ett fixerat eller lutningsbart ryggstöd och kan

utrustas med ett nackstöd som kan justeras i höjdlid. Patientstolen för flebotomi har en hållare på höger sida och ett mångsidigt, justerbart armstöd på vänster sida. Vid behov kan ytterligare ett armstöd beställas.



2227640

Hydraulisk höjdjustering, fotkryss med glidkuddar.



2207302

Hydraulisk höjdjustering, flebotomi-armstöd och rund bottenplatta.

ARBETSSTOLAR OCH PALLAR

GREINERs arbetspallar och arbetsstolar finns tillgängliga i en mängd olika varianter. Höjden kan justeras antingen manuellt eller med fotpedal. Välj mellan två olika ryggstöd

och tre olika sittdynor. Bromsade säkerhetshjul erbjuds också, med elektrisk konduktivitet om så önskas. För detaljer se vår broschyr för arbetsstolar.

Arbetsstolar och pallar med handreglage



4185005

Handreglage för höjjustering, ergonomiskt formad sittdyna, ryggstöd svängbart ca 180° och fotring.



3006205

Handreglage för höjjustering.



4124205

Handreglage för höjjustering och ergonomiskt formad sittdyna.

Arbetsstolar och pallar med fotpedal



3045305

Fotpedal för höjjustering och justerbart ryggstöd.



4105305

Fotpedal för höjjustering.



4155305

Fotpedal för höjjustering, ryggstöd svängbart ca 180°.

ALTERNATIV

MEDSEAT HVE

STYRELEMENT I RYGGSTÖD | Utan (1) eller med (2)



SYNKRON JUSTERING AV RYGG- OCH BENSTÖD | Elektromotorisk (3) eller manuell (4)

MEDSEAT HVE, MEDSEAT HVE SEP

FUNDAMENT | Rörlig (5) eller ej rörlig (6)




MEDSEAT HVE, MEDSEAT HVH

SITTDYNA | Standard (7) eller vridbar 90° (8)




BENSTÖD | Utan (9) eller synkront (10)

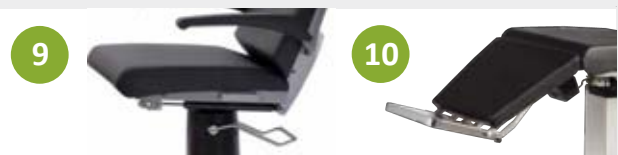

MEDSEAT PODOLOGIE

FUNDAMENT | Elektrisk höjjustering (11) eller hydraulisk höjjustering (12)

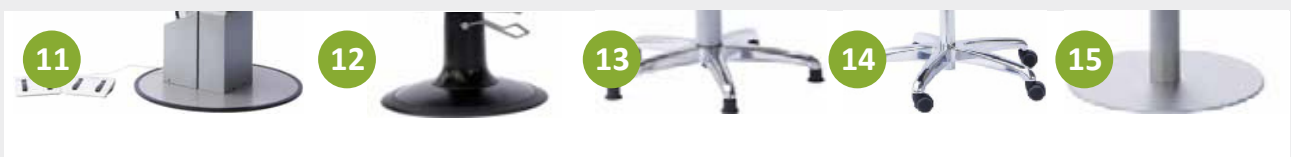

Fotkryss med glidkuddar (13), hjul (14) eller rund bottenplatta (15)

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR FÖR BEHANDLINGSSTOLAR

NACKSTÖD

ÖNH-NACKSTÖD (1)
1445000

NACKSTÖD - SPECIAL (2)
1444100

NACKSTÖD - STANDARD (3)
1461000
(inkluderas i modell 461-474)



BENSTÖD

MED PLATTA (4)
1330900

MED VIKBAR PLATTA (5.1/2)
1337100

MED PLATTA (6)
1330850

BENSTÖD FÖR PODIATRI (7)
1337000



TEKNISK DATA

MEDSEAT HVE | MEDSEAT HVE SEP

Vikt	90-109 kg
Sitsbredd	51 cm
Sitsdjup	45 cm
Totalt djup	70-80 cm
Total höjd	136-166 cm
Total bredd	70 cm
Sitthöjd	58-88 cm
Anslutning	230V/50-60 Hz
Max. patientvikt	200 kg

Lutning av ryggstödet till helt horisontellt läge

LÄNGD FÖR TILLBAKALUTAD STOL

Med benstöd	194-204 cm
Utan benstöd	135-145 cm

JUSTERING AV STOLENS ÖVRE DEL

Manuell justering, 1 motor	24V, IP 44
Elektronisk, synkron justering, 2 motorer ..	24V, IP 44
Elektrisk, separata justering, 3 motorer	24V, IP 44



MEDSEAT HVH

Vikt	55-63 kg
Sitsbredd	51 cm
Sitsdjup	45 cm
Totalt djup	70-80 cm
Total höjd	130-150 cm
Total bredd	70 cm
Sitthöjd	54-74 cm
Max. patientvikt	200 kg

Lutning av ryggstödet till helt horisontellt läge

LÄNGD FÖR TILLBAKALUTAD STOL

Med benstöd	194-204 cm
Utan benstöd	135-145 cm

MEDSEAT PODOLOGIE

Vikt	63-98 kg
Sitsbredd	51 cm
Sitsdjup	45 cm
Totalt djup	70 cm
Total höjd, hydrauliskt	130-150 cm
Total höjd, elektriskt	136-166 cm
Total bredd	70 cm
Sitthöjd, hydrauliskt	54-74 cm
Sitthöjd, elektriskt	58-88 cm
Längd för tillbakalutad stol	184-194 cm
Anslutning	230V/50-60 Hz
Max. patientvikt	200 kg

JUSTERING AV STOLENS ÖVRE DEL

Manuell justering, 1 motor	24V, IP 44
Elektronisk, synkron justering, 2 motorer	24V, IP 44

MikronMed
FOCUSED ON MEDICAL LASERS

Industrigatan 58
SE-291 36 Kristianstad

Tel +46 (0)44 21 21 26
Fax +46 (0)44 21 21 79

www.mikronmed.se
info@mikronmed.se

 **GREINER**

Riedbachstraße 5
74385 Pleidelsheim
Tyskland

Tel +49-7144-8112-0
Fax +49-7144-8112-99

www.greiner-gmbh.de
info@greiner-gmbh.de



Certifierat kvalitetssystem DIN EN ISO 13485

Greiner medseats - 160229